

PEROXTESMO KO

en

Test Paper for the determination of Peroxidase (in the food processing industries): only for professional user

Pack content:

100 Test Papers, 15 x 15 mm

Color reaction:

PEROXTESMO KO react with Peroxidase, to yield blue spots against a white background.

Safety precautions:

Test paper contains o-Tolidine hydrochloride 0.10–2.50% CAS 612-82-8. DANGER May cause cancer. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. IF exposed or concerned: Get medical advice / attention. Store locked up. For further information, please ask for safety data sheet (*see www.mn-net.com/MSDS*).

Method of application:

Apply a drop of the test solution, such as vegetable juice, to the test paper or press the cut area of the plant to be tested firmly against the test paper. Any blue to bluish green coloration within two minutes is indicative of the presence of peroxidase. Don't touch the test paper with the fingers.

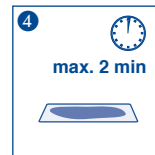
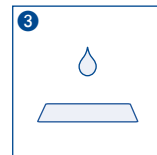
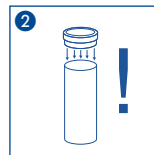
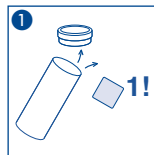
Disposal:








Dispose of used test papers at an authorized hazardous waste collection point.

Specificity:

PEROXTESMO KO is specific for the determination of peroxidase. The use of PEROXTESMO KO can only be considered a preliminary test.

The test paper will slowly (over a period of six months) change to brown, but as long as the bluish reaction colors are visible, it can still be used.



REF Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
 Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!	 Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
 Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury	 Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
 Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia	 Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
 Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>	